

# Exame Anatomopatológico – Histopatológico

As orientações abaixo se aplicam aos exames:

**Histopatológico de Biópsia de Medula Óssea [BIOPM]**  
**Histopatológico de Biópsias Gerais [BIOP]**  
**Histopatológico de Dente, Osso [BIOPD]**  
**Histopatológico de Fígado [BIOPF]**  
**Histopatológico de Pele [BPELE]**  
**Histopatológico de Sistema Nervoso [BISNC]**  
**Histopatológico de Peça Pequena [PECP]**  
**Histopatológico de Peça Grande [PECG]**  
**Necropsia de Feto**  
**Amputações Oncológicas e Não Oncológicas**

**Material:** Verifique os materiais adequados a cada código de exame no nosso guia.

**Volume Mínimo:** 1 fragmento com pelo menos 1x2x2 mm.

**Método:** Histologia.

**Meio de coleta:** Frasco ou saco cirúrgico.

**Critérios de rejeição:**

- Amostra com fixação inadequada, insuficiente ou em meio inadequado;
- Informações divergentes entre pedido médico e identificação da embalagem;
- Falta de documentos.

**Documentos:**

- Requisição Médica;
- TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
\*Para amostras coletadas fora do estado de São Paulo

**Estabilidade da amostra:** Indeterminado, após fixação adequada com formalina a 10% (formol a 4%).

**Transporte:** Em temperatura ambiente.

**Instruções adicionais:**


**Biópsias:** São pequenos fragmentos representativos de um órgão, lesão ou região anatômica.

**Peças cirúrgicas:** São provenientes de cirurgias de pequeno, médio e grande porte. São lesões inteiras, órgãos, estruturas ou segmentos. Em geral, designadas como excisão, ectomias etc. Consulte lista de materiais para cadastro em cada mnemônico.

## Acondicionamento, embalagem e fixação:

### Biópsias e pequenos fragmentos

Acondicionar o fragmento em frasco hermeticamente fechado e identificado com nome do paciente, data de nascimento e topografia/região anatômica da amostra.

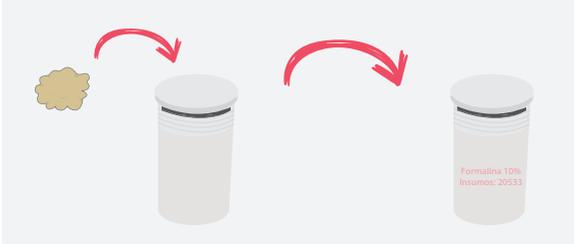

- Coloque o fragmento de tecido no frasco com formol, feche o frasco e reforce o fechamento com fita adesiva para assegurar a vedação. Condições específicas:
- Biópsia de testículo para pesquisa de infertilidade: Fixação com Bouin. Todos os frascos e amostras/topografias devem estar descritos em pedido médico.



- Acondicione todas as amostras de um mesmo paciente na embalagem (bag) secundária.
- Identifique a embalagem, coloque o pedido médico na embalagem canguru e feche as embalagens com a parte auto-adesiva.
- Identifique a embalagem com a quantidade de frascos (1 paciente 3 frascos, por exemplo).
- Coloque apenas as amostras de um mesmo paciente na embalagem secundária.

Atenção: evite o uso de frascos de vidro, pois estes podem se quebrar, colocando em risco as pessoas envolvidas no transporte e possibilitando a perda de amostra. Frascos de boca estreita também devem ser evitados, pois ao ser colocada no formol; a amostra enrijece, o que impossibilita sua remoção.

### Peças cirúrgicas – amostras médias e grandes

Imergir a amostra em saco cirúrgico resistente, com sistema hermético de fechamento, e identificar o saco com nome do paciente, data de nascimento e identificação da amostra (localização anatômica).

Fixação: Preencher com formol o suficiente para cobrir a amostra. Vedar adequadamente o saco cirúrgico. Todo material enviado para análise deve ser descrito em pedido médico.



**Atenção:** Tamanho máximo da embalagem: Comprimento: 43cm Largura: 41cm Altura 35cm



- Coloque as embalagens primárias de um mesmo paciente em uma embalagem secundária.
- Identifique a embalagem secundária com a etiqueta de identificação do paciente.
- Numere a quantidade de amostras na embalagem secundária (1 paciente 1 saco primário, por exemplo).
- Coloque o pedido médico na embalagem canguru e vede com a fita autoadesiva.

Atenção: evite o uso de frascos de vidro pois estes se quebrar, colocando em risco as pessoas envolvidas no transporte e possibilitando a perda de amostra. Frascos de boca estreita também devem ser evitados, pois ao ser colocada no formol; a amostra enrijece, o que impossibilita sua remoção.

### Necropsia de Feto

Fetos, produtos de aborto, podem ser enviados desde que atendam aos requisitos abaixo:

Peso máximo : 499 gramas.  
Idade Gestacional: até 19 semanas e 6 dias (descrito no pedido médico).  
Tamanho: até 24,9 centímetros.

Ultrapassando os limites determinados, deve ser emitido declaração de óbito e o feto enviado para SVO.

### Amputações Oncológicas e Não Oncológicas

- Para amputações de causas não oncológicas, apenas amostras de tecidos de interesse devem ser enviadas para análise histopatológica.
- Amputações de causas oncológicas podem ser enviadas para exame histopatológico.
- Consulte o SAC/Assessoria Científica antes do envio de produtos de amputações.